


FEMMTO

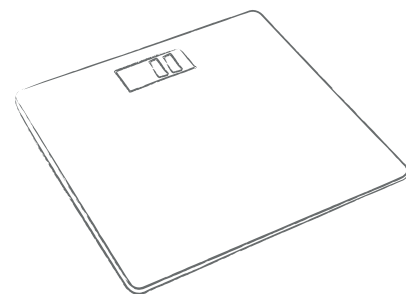

balanza de baño digital

Manual de Instrucciones

Antes de usar los productos por primera vez, por favor lea atentamente el manual de instrucciones para uso doméstico solamente y manténgalo para referencia.

1


Especificaciones

- > Sensor de alta precisión
- > Peso máximo: 180 kg
- > División: 0.05 kg
- > Unidad: kg
- > Encendido y apagado automático
- > Indicación de baja potencia y sobrecarga

Fuente de Alimentación

Batería: 2 x 1.5V AAA (No incluidas)

Abra la cubierta de la batería y saque la cinta aislante cuando se utiliza inicialmente.

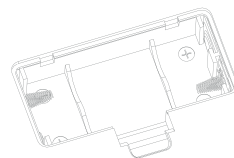


Funcionamiento

Paso 1: Coloque la báscula en una superficie plana y nivelada. Por favor no utilice la misma sobre alfombra ya que puede afectar la precisión.

Paso 2: Al pisar sobre la plataforma, una vez que el peso se ha estabilizado, el mismo se bloqueará en la pantalla.

Paso 3: La báscula comparará automáticamente el peso actual con el valor del anterior pesaje mostrando la diferencia entre ambos valores e indicando si la misma es positiva ↑ o negativa ↓. Si no hay diferencia titilará la letra "M".

Paso 4: El dispositivo se apagará automáticamente luego de 10 segundos de no ser utilizado.

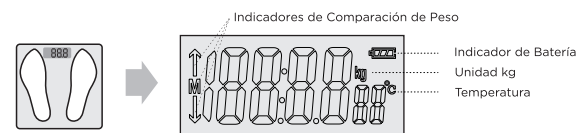

2

Códigos de Error

Indicación de baja potencia

Cuando la pantalla LCD indique "Lo", abra la tapa de la batería y reemplace la batería nueva con la polaridad correcta.



Sobrecarga

Capacidad máxima excedida. Cuando la báscula esté sobrecargada (más de 180 kg) "OL" aparecerá en la pantalla.



Consejos de Uso y Cuidado

> Coloque la báscula sobre una superficie dura y plana durante su uso para asegurar la mayor precisión.

> Limpie la báscula con un paño húmedo, pero no permita que el agua penetre en la unidad y/o en su interior.

> Por favor, retire la batería de la báscula si no se ha utilizado durante un período prolongado.

> No apilar nada sobre la balanza mientras NO se use la misma.

> Nunca utilice limpiadores abrasivos o disolventes químicos ya que pueden estropear la carcasa.

> No ponga la báscula en posición vertical.

> No deje caer ni golpee la balanza, esto puede dañar el sensor y el vidrio.

> Para garantizar la vida útil del producto evite dejarlo en un ambiente húmedo o caliente.

> Si la báscula no funciona, compruebe la batería y asegúrese de que la misma tiene la polaridad correcta.

3

FEMMTO

FEMMTO Argentina
info@femmto.com.ar
www.femmto.com.ar

Importado y Distribuido en Argentina por Disbyte S.A.
CUIT 30-71494353- 3
Fabricado en CHINA



4