


# FEMMTO

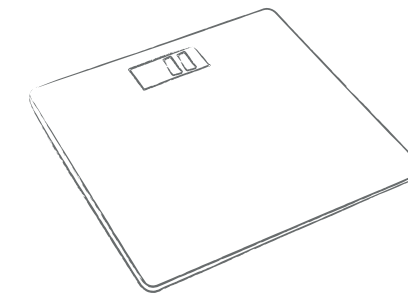

## balanza inteligente

### Manual de Instrucciones

Gracias por haber elegido nuestro producto. Antes de usarlo por primera vez por favor lea atentamente el manual de instrucciones y manténgalo para referencia.

1

### Especificaciones


- > Peso máximo permitido: 180 kg.
- > Encendido y apagado automático.
- > Métricas: % de grasa corporal, % de agua, % de músculo, % de masa ósea (kg), IMC, calorías, % de grasa visceral, datos de la edad corporal.
- > Sensor de alta precisión.
- > División: 0,05 kg.
- > Conectividad inalámbrica.
- > Indicación de baja potencia y sobrecarga

### Fuente de Alimentación

Este producto funciona con 2 pilas AAA (no incluidas en el contenido)

### Funcionamiento

- Paso 1:** Use la balanza en una superficie dura y plana, de lo contrario no indicará los valores con precisión.
- Paso 2:** Al pisar sobre la plataforma, una vez que el peso se ha estabilizado, el mismo se bloqueará en pantalla.
- Paso 3:** La balanza se apagará automáticamente a los 10 segundos de NO ser utilizada.

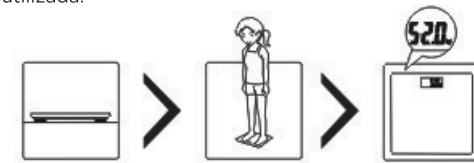


2

### Funciones de la conectividad inalámbrica

Cómo conectar por bluetooth para la medición de: % de grasa corporal, % de agua, % de músculo, masa ósea (kg), IMC, calorías, % de grasa visceral y datos de la edad corporal.

- Paso 1:** Busque y descargue la APP desde App Store o Play Store. Nombre de la aplicación: **AIFit**

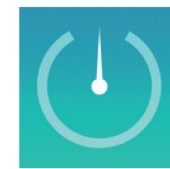


> Escanee el código QR para descargar la aplicación <AIFit> en su teléfono. **Atención:** Nuestra APP es compatible con sistemas IOS o Android a partir de la versión 4.3 o superior y con Bluetooth 4.0.



3

### Paso 2: Registro de usuario

- > Abra la aplicación <AIFit> y registre una cuenta.
- > Edite el usuario y complete el perfil.

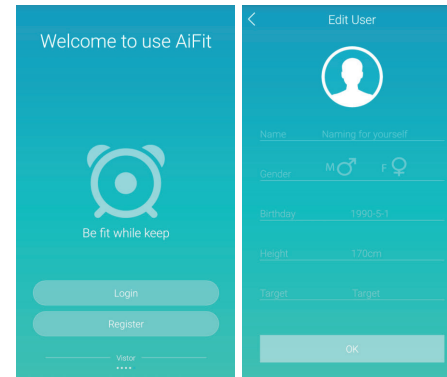


### Paso 3: Conectar el bluetooth en el teléfono

- > Encienda el bluetooth en su teléfono yendo a "Ajustes" o "Configuración" y luego busque la opción "Bluetooth".




4

- > Ingrese a la APP "AIFit" y luego la aplicación se emparejara con la balanza inteligente de forma automática.

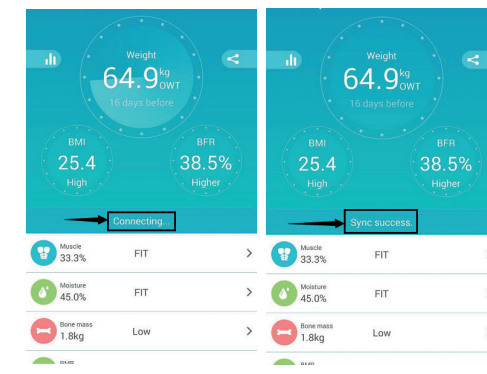

- > Si quisiera emparejar otro dispositivo por favor haga clic en <Mis dispositivos> y siga los pasos.

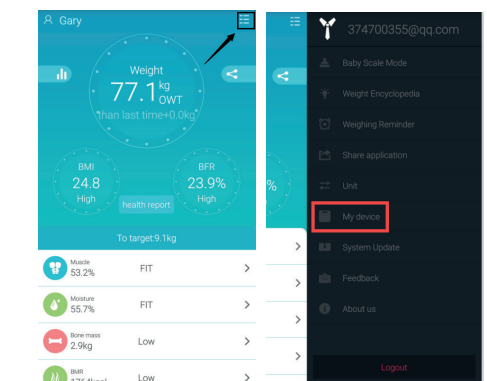

5

### Paso 4: Métricas

- > Coloque la balanza en una superficie dura y plana y asegúrese que el display muestre "0.0".
- > Pise la plataforma de la balanza con los pies descalzos y parese lo más estable posible hasta que se muestre y bloquee la lectura de peso en la pantalla, y luego espere una segunda unidad que muestre sus datos de medición en la aplicación.



### Códigos de Error

#### Indicación de mensaje de error

Cuando la pantalla LCD marque el mensaje ERR es porque el peso excede la capacidad del permitido de 180 kg. Por favor remueva el peso de la balanza para evitar daños en el sensor de la misma.



6

### Batería baja

Cuando la pantalla LCD marque el mensaje LO es porque las baterías se encuentran agotadas. Abra la tapa de la batería en la parte de atrás de la balanza y reemplace por nuevas con la polaridad correcta.



### Consejos de Uso y Cuidado

- > Coloque la balanza sobre una superficie dura y plana durante su uso para asegurar la mayor precisión.
- > Limpie la balanza con un paño húmedo pero no permita que el agua penetre en la unidad y/o en su interior.
- > Por favor retire la batería de la balanza si no se ha utilizado durante un periodo prolongado.
- > No apilar nada sobre la balanza mientras NO se use la misma.
- > Nunca utilice limpiadores abrasivos o disolventes químicos ya que pueden estropear la carcasa.
- > No ponga la balanza en posición vertical.
- > La balanza es de uso hogareño/familiar. NO es apta para uso comercial o industrial.
- > Los valores informados de todas las métricas son referenciales. En el caso de necesitar asistencia para un programa de ejercicio o dieta por favor consulte a su medico.
- > Para mayor precisión de las métricas utilice la balanza sin zapatos y sin medias.
- > No deje caer ni golpee la balanza, esto puede dañar el sensor y el vidrio.
- > Para garantizar la vida útil del producto evite dejarlo en un ambiente húmedo o caliente.
- > Si la balanza no funciona compruebe la batería y asegúrese de que la misma tiene la polaridad correcta.

7

# FEMMTO

FEMMTO Argentina  
info@femmto.com.ar  
www.femmto.com.ar  
Importado y Distribuido en Argentina por Disbyte S.A.  
CUIT 30-71494353- 3  
País de origen: CHINA



8