

# FEMMTO®

HEALTHCARE

## Masajeador Almohada MJ003




## Manual de usuario

Muchas gracias por comprar el masajeador **FEMMTO MJ003**. Antes de usar el masajeador, por favor lea este manual cuidadosamente. Conserve este manual para futuras referencias. Si encuentra algún problema durante su uso, por favor contáctese con el servicio técnico correspondiente.

### CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno y liviano  
Motor silencioso  
Dos cabezales masajeadores de 8 nodos cada uno  
Masajes estilo Shiatsu de tres velocidades y con cambio de giro  
Función de calor  
Sesiones de 15 minutos, con apagado automático  
Apto para su uso en todo el cuerpo: nuca, abdomen, cintura, brazos, piernas y pies  
Elimina la fatiga y la tensión muscular. Elimina toxinas y activa la circulación sanguínea  
Masaje relajante y descontracturante  
Incluye cable para conexión al auto

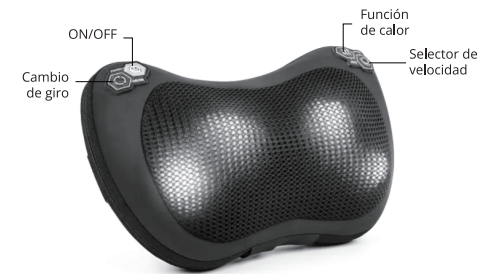

### QUÉ INCLUYE LA CAJA

Masajeador FEMMTO MJ003  
Fuente de alimentación  
Cable de conexión para automóvil  
Bolso de transporte

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fuente de alimentación: Entrada: 220 VAC – 50 Hz Salida: 12 VDC - 2 A  
Potencia: 24 W  
Tiempo de uso: 15 minutos por sesión  
Material exterior: Cuero PU  
Material de espuma: Poliuretano  
Nivel de ruido: 50 dB(A)  
Dimensiones: 32 x 19 x 10 cm  
Peso: 900 g

### PRECAUCIONES

- Este producto no es a prueba de agua. Manténgalo alejado de zonas con agua u otros líquidos, o zonas húmedas. Mantenga el producto lejos de recipientes con agua. Caso contrario puede generarse riesgo de choque eléctrico.
- No desenchufe la unidad mientras la esté usando. Apague la unidad antes de desconectarla.
- Siempre desenchufe la unidad cuando no la utilice, o cuando se corte el suministro eléctrico.
- Nunca utilice la unidad si el cable o el enchufe están dañados. No intente reparar el cable de alimentación si está dañado. Comuníquese con el servicio técnico correspondiente para recibir asistencia.
- Mantenga la unidad y el cable de alimentación alejados de fuentes de calor, incluso de mantas eléctricas.
- Para evitar choque eléctrico o lesiones, no intente abrir ni desarmar ninguna parte de la unidad sin autorización de profesionales. No permita que menores de edad jueguen con la unidad.
- Utilice este artefacto únicamente para el uso específico descrito en este manual.
- Se recomienda que quienes usan marcapasos consulten con su médico antes de utilizar este producto.
- No desarme, repare ni modifique el masajeador, evite daños en personas y propiedades. No abra el cierre del producto sin autorización de un técnico capacitado. Modificar, abrir y/o intervenir el producto causará la anulación automática de la garantía.

### INSTRUCCIONES DE USO

- Conecte el masajeador a la fuente de alimentación, y luego enchufe la fuente de alimentación a la red eléctrica (220V)
- Presione el botón de encendido para comenzar la sesión de masaje: el calentador se encenderá automáticamente y los rodillos masajeadores comenzarán a girar, cambiando la dirección de giro cada 1 minuto.
- Cada sesión de masajes tiene una duración de 15 minutos: una vez alcanzado este tiempo el equipo se apagará automáticamente. En caso de querer interrumpir la sesión, presione el botón de encendido para apagar el equipo manualmente.
- Presione el botón de cambio de dirección para invertir la dirección de giro de los rodillos masajeadores, luego de 1 minuto volverá a cambiar automáticamente su dirección de giro.
- Presione el botón de calor para encender y apagar manualmente el calentador de los rodillos masajeadores. El equipo indica con luces en los rodillos que el calentador está activado.  
**NOTA:** Deje un tiempo de descanso de al menos 15 minutos entre sesiones, esto ayudará a evitar fatigas en la zona masajeadora; y ayudará a evitar posibles recalentamientos en el motor del masajeador.
- Presione el botón de velocidad para cambiar la velocidad de giro de los cabezales masajeadores. El equipo trae tres velocidades disponibles (bajo, medio y alto).
- Conexión al auto: utilice el cable adicional que incluye el masajeador para conectarlo al auto y utilizar su batería para alimentarlo.  
**NOTA:** El masajeador NO debe ser utilizado por el conductor. Evite distracciones al momento de manejar. No utilice el masajeador dentro de un vehículo cuya temperatura de habitáculo supere los 40°C.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Desenchufe siempre la unidad antes de limpiarla. Nunca toque el enchufe con las manos mojadas. Deje enfriar la unidad antes de limpiarla, al menos 15 minutos después de la última sesión. Limpie la unidad con un paño suave y seco. No utilice paños con productos químicos, alcohol o solventes. No sumerja nunca ninguna parte de la unidad en ningún líquido. Si la unidad está sucia en alguna parte, siga estas instrucciones:

- Humedezca un paño en agua o en una solución de detergente suave 3%-5%.
- Limpie las áreas con el paño húmedo.
- Enjuague el paño en agua y escúrralo, luego limpie todo resto de detergente de la superficie de la unidad.
- Limpie las áreas con un paño suave y seco.
- Espere que la unidad se seque completamente antes de utilizarla.

Coloque el masajeador en un lugar seco y fresco. Evite el contacto con objetos cortantes o punzantes que puedan cortar o perforar la superficie.

## SEGURIDAD PERSONAL

No abra el cierre de la tela que recubre la almohadilla ya que quedaría expuesto el mecanismo y puede ser peligroso para manipularlo. Mantenga los dedos alejados del mecanismo. Las personas que padecen alguna de las siguientes condiciones o en tratamiento médico deben consultar a su médico antes de utilizar la unidad. Si se siente mal o si el masaje se torna doloroso durante el funcionamiento, suspenda el uso de inmediato:

- Mujeres embarazadas, personas enfermas o en malas condiciones físicas.
- Personas que tienen médicamente prohibido recibir masajes debido a trombosis, aneurisma, várices de grueso calibre y otros trastornos de la circulación.
- Las personas con marcapasos deben consultar al médico antes de usarlo.
- Personas con curvaturas irregulares de columna.

Si tiene alguna consulta relacionada con la salud, consulte a su médico antes de utilizar el producto. Nunca use el producto directamente sobre áreas inflamadas o hinchadas ni sobre lesiones cutáneas o heridas abiertas. No utilice la unidad directamente sobre la piel: utilizar prendas finas pueden aumentar la efectividad pero la aplicación de masajes directamente sobre la piel puede causar irritación. No se quede dormido utilizando la unidad. No utilice la unidad después de haber bebido alcohol. Nunca utilice alfileres y otros broches metálicos con este artefacto. En caso de calentamiento excesivo, suspenda el uso y deje enfriar la unidad antes de utilizar. No use este producto como reemplazo del tratamiento médico. No apto para menores de edad, personas discapacitadas, personas dormidas o inconscientes. Este artefacto está diseñado para uso personal, no profesional.

**ESTE PRODUCTO NO ESTÁ DESTINADO AL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO O REHABILITACIÓN DE ENFERMEDADES O LA ANTICONCEPCIÓN EN SERES HUMANOS.**

## PROBLEMAS COMUNES

Por favor refiérase a las siguientes recomendaciones y soluciones cuando encuentre problemas en el uso del producto. Si tras repasar la tabla la falla persiste, por favor envíe el producto al servicio técnico correspondiente para inspección y mantenimiento.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El masajeador falla al encender	La fuente de alimentación o el conector para el auto no se encuentra correctamente conectado.	Verifique la correcta conexión de la fuente de alimentación o cable para el auto, y pruebe nuevamente.
Los cabezales de masaje giran con menos velocidad.	La carga sobre los cabezales de masaje es excesiva.	Reduzca la presión e inténtelo de nuevo.

### ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO DEBE USARSE CON UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN QUE POSEA LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS SALIDA 12V---2000mA, 24W. EL USO DE UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN DIFERENTE A LA INDICADA PUEDE PRODUCIR DAÑOS AL EQUIPO DE FORMA IRREVERSIBLE Y PONER EN RIESGO LA SEGURIDAD DE PERSONAS, ANIMALES Y BIENES.

## SERVICIO POSTVENTA

El importador garantiza este producto por el término de 6 (seis) meses, contados desde la fecha de compra asentada en esta garantía y acompañada de la factura de compra.

1. Dicha garantía no es válida en caso de mal funcionamiento causado por razones personales, como se detalla a continuación.

- Por el desarme y modificación del producto.

- Por una caída al recoger el producto o al utilizarlo.

- Por el uso inapropiado o la falta de cuidado razonable.

- Por utilizar el producto sin seguir el manual de instrucciones.

- Por desastres naturales, como inundación o incendio.

- Por reparación realizada por un fabricante no autorizado.

2. Si necesita servicio técnico sin costo, presente la garantía y la factura de compra.

3. Para dicho servicio, póngase en contacto con los técnicos autorizados.

4. En caso de necesitar servicio técnico, puede proporcionar información sobre los componentes del producto para circuitos de esquemas y reparación, identificados por nuestro personal técnico calificado.

5. Al reparar algunas fallas con nuestro servicio técnico, tendremos en cuenta los recargos razonables.

¿Necesitas ayuda?



[hola@femmto.com](mailto:hola@femmto.com)